

novafon®

Bewährte Wirkweise.
Schmerzen lindern.
Muskulatur detonisieren.





Facts



40.000+ Therapeut:innen,
Kliniken und Praxen benutzen
das novafon als zuverlässigen
Partner in der Therapie.

Effektiv Schmerzen und neurologische Symptome mit novafon behandeln

In der Therapie sind deine Hände dein wichtigstes Werkzeug – doch Behandlungen können anstrengend sein. Deshalb vertrauen bereits über 40.000 Therapeut:innen auf novafon.

Unsere zertifizierten Medizinprodukte ermöglichen dir eine gezielte, vibro-taktile Tiefenstimulation von Gewebe und Muskeln – wissenschaftlich fundiert, sanft und effektiv. So kannst du deine Patient:innen effizient und schonend unterstützen – für nachhaltige und verbesserte Therapieerfolge.

Das breite Anwendungsspektrum reicht dabei von Kopf bis Fuß: novafon ist sowohl für die Schmerzlinderung an empfindlichen Körperstellen wie Fingern, Ellenbogen, Kiefer oder Achillessehne als auch zur Behandlung großer Muskelgruppen bestens geeignet.

Die Wirkung der lokalen Vibrationstherapie ist durch zahlreiche Studien belegt und wird bereits seit 1932 erfolgreich angewandt. Mit novafon Schmerzen lindern, Symptome neurologischer Erkrankungen behandeln und Stimm-, Schluck- und Sprechstörungen behandeln. Überzeuge dich selbst.



Klingt zu schön, um wahr zu sein?
Hier findest Du Studien und Erfahrungsberichte
rund um die lokale Vibrationstherapie mit novafon.

Für deine Therapie gemacht. Nachweislich wirksam. Wissenschaftlich belegt.

Bereits seit über 90 Jahren stellen wir Schallwellengeräte her. Die Marke novafon ist Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation.

Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kund:innen.

[Made in Germany](#)

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.

[Zertifiziertes Medizinprodukt](#)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist die benannte Stelle (Identifikationsnummer 0123) von novafon für die Vibrationsschallwellengeräte. Alle anderen novafon-Produkte werden geprüft, und die Konformität wird in alleiniger Verantwortung von novafon erklärt.



Von Kopf bis Fuß, ein breites Behandlungsspektrum.

Gezielte Aktivierung & Entspannung der Muskulatur – für spürbare Therapieerfolge von Symptomen bei:

- Akuten & Chronischen Schmerzen
- Neurorehabilitation (Sensomotorik)
- Stimm- & Schluckbeschwerden

Unsere Wirkversprechen für Dich:

- Schmerzen lindern
- Muskulatur detonisieren
- Muskulatur aktivieren
- Durchblutung fördern
- Beweglichkeit verbessern
- Gangbild verbessern
- Handmotorik verbessern
- Wahrnehmung fördern
- Teilhabe im Alltag steigern
- Sensibilität verbessern
- Spastiken lösen
- Tonus regulieren
- Stimmstörungen behandeln
- Schluckbeschwerden verbessern
- Artikulationsstörungen verbessern

Verbesserung deiner Symptome bei:

- Rückenschmerzen
- Sehnenschmerzen bei Tennis- und Golferellenbogen
- Kiefergelenksschmerzen und -verspannungen (CMD)
- Gelenkschmerzen (Arthrose)
- Rheumatische Schmerzen
- Fibromyalgie
- Narbenschmerz
- Schlaganfall
- Multiplesklerose (MS)
- Infantile Cerebralparese
- Chirurgischen Eingriffen
- Dysphagie
- Myofunktionelle Störungen



Senkrechte Stimulation

Durch die senkrechte Stimulation entfalten sich die Vibrationen wissenschaftlich nachgewiesen dort im Gewebe, wo ihre Wirkung erzielt werden soll.



Flexible Anwendungsmöglichkeiten

Durch verschiedene Frequenzen (50 Hz, 75 Hz, 100 Hz)* kann der Muskeltonus je nach Behandlungsziel entweder erhöht (Aktivierung) oder reduziert (Entspannung) oder Schmerzen gelindert werden.



9cm + Tiefenwirkung

novafon Geräte haben eine gezielt einsetzbare Tiefenwirkung* von 9 cm +, während andere Geräte wie z. B. Massageguns oft nur oberflächlich stimulieren.

* Anzahl der Frequenzen und Tiefenwirkung können je nach Gerätetyp variieren.
Siehe Gerätevergleich S. 14-15.

Lokale Vibrationstherapie.

Bewährte Methode.

Effektive Tiefenwirkung.

Mit insgesamt drei verschiedenen Frequenzen - 100, 75 und 50 Hz ermöglicht novafon eine systematische und vielseitige Behandlung.

100 Hz | Linderung von Schmerzen

Durch niederfrequente, mechanische Stimulation werden Reize über Aβ-Fasern an das Rückenmark weitergegeben. Aufgrund der schnelleren Leitung von Aβ-Fasern im Vergleich zu schmerzleitenden C-Fasern kann die 100 Hz Frequenz hemmend auf die Weiterleitung von Schmerzreizen wirken – gemäß der Gate-Control-Theorie* und ohne Medikamente.

75 Hz | Aktivierung der Muskulatur


Die Frequenz dient der Aktivierung und der Verbesserung der senso-motorischen Kontrolle. Sie stimuliert Vater-Pacini-Körperchen, die schnelle Druckveränderungen und Vibrationen wahrnehmen. Dadurch werden sensorische Aktivität, Wahrnehmung und die lokale Durchblutung gesteigert.**

50 Hz | Entspannung der Muskulatur


Über die Aktivierung tiefergelegener Dehnungsrezeptoren in Muskulatur und Sehnen wirkt die Frequenz auf neuromuskuläre Reflexmechanismen. Die Vibration kann Ia-Afferenzen hemmen und den tonischen Vibrationsreflex (TVR) auslösen. Bei längerer Anwendung kann dies auf Rückenmarksebene zu einer Reflexhemmung führen und dadurch den Muskeltonus regulieren.

* Quellen „Gate-Control-Prinzip“ siehe letzte Seite Umschlag.

** Anzahl der Frequenzen kann je nach Gerätetyp variieren. Siehe Gerätevergleich S. 14-15.

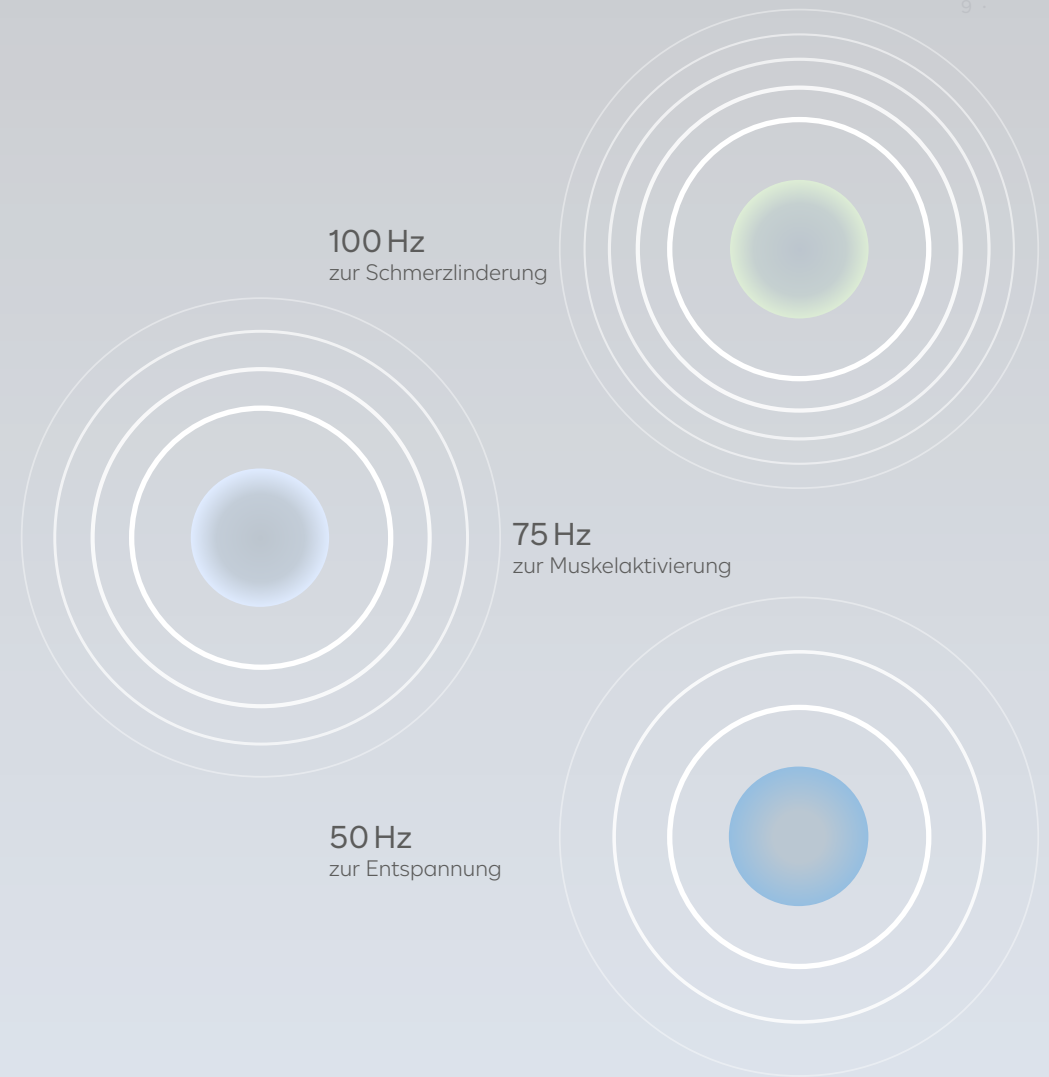

Zitat

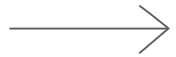

Insgesamt sind nicht nur wir als Therapeut:innen, sondern auch unsere Patient:innen von der Wirksamkeit und dem Einsatz des novafons überzeugt. [...]

Therapiezentrum Langwasser (Logopädie), Nürnberg, 20.01.2022



Erfahrungen, die bewegen. Stimmen aus der Community.

„Nach sechs Behandlungseinheiten à 10 Minuten hat sich das **subjektive Steifheitsgefühl innerhalb des Narbenbereichs der Patientin verbessert** und das Narbengewebe selbst hat an Tonus verloren und an Elastizität gewonnen.“

Maja Paulsen, Physiotherapeutin (Aktiv und Gesund Budenheim GmbH), 2025

„Wir haben in unserer Hochschule eine große Bachelorarbeit mit dem novafon zum Thema **Narben** durchgeführt. Dort konnten wir zeigen, dass **Narbenmobilität, Missempfindungen und Schmerz** sich fast durchgängig bei den Probanden verbessert haben. Nicht nur die Therapeuten, sondern auch die Probanden waren sehr angetan von dieser Entwicklung.“

Nils Bringeland (Physiotherapeut), Kiel 2025

„Eine Patientin berichtet von deutlichen **Verbesserungen ihres Schmerzempfindens** [...]. Die Behandlung sei für sie sehr wohltuend. Zudem ist die **Daumenmuskulatur** deutlich gelockert. Die **Narbenbeschaffenheit** hat sich ebenfalls verbessert. Sie berichtet, dass sie heute wieder aktiver an ihrem Leben teilhaben kann. [...] Eine weitere Behandlung mit dem novafon ist daher zu empfehlen.“

Michelle Möbius (Ergotherapeutin), Bingen 2025

92 %

der befragten Therapeut:innen
setzen das novafon regelmäßig
zur effektiven Schmerzlinderung
in ihrer Therapie ein.*



*novafon Anwendungsbefragung 2022 (253 teilnehmende Therapeut:innen)

Gerätevergleich



novafon max+

Maximale Intensität für alle Behandlungen & flexibel anpassbar

Frequenzen

100 Hz | 75 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

15 Intensitätsstufen individuell einstellbar

Display


High-res LCD-Display



Tiefenwirkung

9 cm +

Intensitätsspektrum

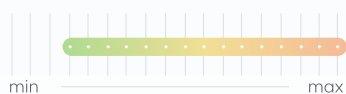

novafon max

Kraftvoller & intuitiver Einstieg in deine Therapie

Frequenzen

100 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

nur für Firmware-Update

Display


LED-Dot-Display



Tiefenwirkung

9 cm +

Intensitätsspektrum

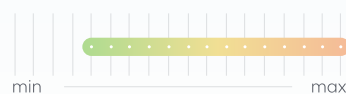

novafon one+

Sehr sanfte bis starke Behandlungen & flexibel anpassbar

Frequenzen

100 Hz | 75 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität

15 Intensitätsstufen individuell einstellbar

Display


High-res LCD-Display



Tiefenwirkung

6 cm +

Intensitätsspektrum

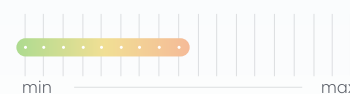

novafon one*

Sanfte Schmerzlinderung für sensible Bereiche

Frequenzen

100 Hz | 50 Hz

App-Konnektivität



Display


LED-Anzeige



Tiefenwirkung

6 cm


Intensitätsspektrum

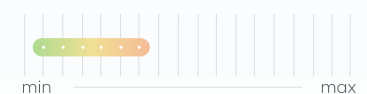

*Hinweis zur Produktumbenennung:

novafon one bisher bekannt als „DAS NOVAFON“

novafon one+ bisher bekannt als „DAS NOVAFON power 2“

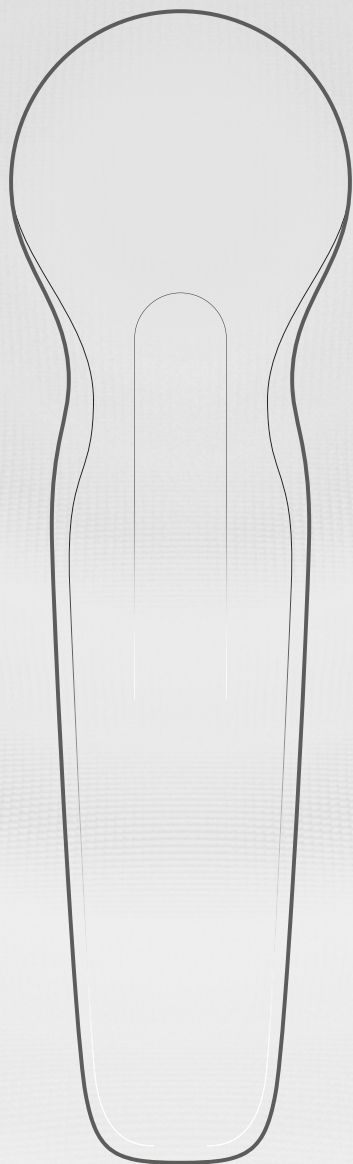

Unsere Produktwelt **max**

Geräte novafon max+ & max | Aufsatz-Sets & Zubehör



novafon max+

Maximale Kraft.
Spürbar Wirksam.

15 Intensitäten
feinjustierbar über
die novafon App

Travel Lock
Funktion

5 Intensitäten per
Tastendruck

9 cm +
Tiefenwirkung

2.7x stärker als
unsere one-Serie

Einfaches Laden per
Magnetkontakt



Bluetooth-Konnektivität
zur novafon App

High-Res
LCD-Display

3 Frequenzen
100 Hz, 75 Hz, 50 Hz

Strahlwasserge-
schützt nach IP65

Mehr Infos
in unserem Shop.





novafon max

Tief wirksam. Einfach stark.




Mehr Infos
in unserem Shop.



Müheloser Aufsatzwechsel.

Dank des intuitiven Stecksystems sitzt jeder Aufsatz sofort.

Durch eine leichte Drehbewegung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand anzubringen oder zu lösen.

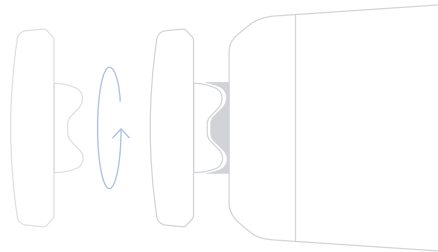

Teller Aufsatz



zur flächigen Anwendung
und zum Ausstreichen

Kugelaufsatz

kleinflächigere und
punktuelle Behandlungen



Teller- und Kugelaufsatz sowie ein Ladekabel
mit Netzstecker sind Teil des Lieferumfangs
beim Kauf eines novafon Gerätes.

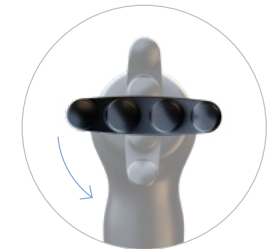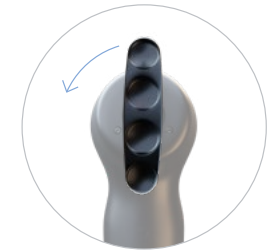

Die Aufsätze für das novafon max+ und max
sind um 90 Grad drehbar und können so
flexibel an die Bahnen großer Muskelgruppen
angepasst werden.

Dies sorgt für eine kräfteschonende Anwen-
dung ohne Verrenkungen und bietet eine noch
angenehmere Behandlung.

Liegt gut in der Hand.
Entwickelt für deine langen
Behandlungs-Tage.



Ergonomische Geräteform

Unsere ergonomischen Geräte ermöglichen unterschiedlichste Greif- und Haltepositionen und erlauben dadurch ein gezieltes Applizieren der Vibrationen. Das sorgt für eine überaus effiziente und komfortable Behandlung.

Alle Einstellungen lassen sich zudem intuitiv einhändig steuern. Entsprechend muss das Gerät während der Behandlung nicht abgesetzt werden und Behandlungsschritte können nahtlos ineinander übergehen.

Für jede Anwendung der passende Aufsatz.

Faszien-Set max

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen



Knöchelaufsatz

Ideal für konvexe Körperbereiche. „Knöchel“-Struktur ist der Therapeutenhand nachempfunden und ermöglicht eine effektive Bearbeitung der Muskulatur.



Faszien-Pflug


Der Faszien-Pflug arbeitet präzise in sensiblen Regionen wie Nacken und Unterschenkel und löst hier das Gewebe & Verspannungen.



Faszien-Schieber

Der Faszien-Schieber ermöglicht eine intensive, großflächige Anwendung in konkaven und konvexen Gebieten, um Faszienstränge auszustreichen.

novafon max & max+
Alle Aufsätze sind erhältlich
in Schwarz und Weiß.

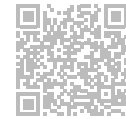


Scannen & das
Kryo-Infopaper
downloaden!

Finde Anwendungen, Tipps &
Wissen zur Kältetherapie in
unserem Kryo-Infopaper.

info.novafon.com/novafon-infopaper-kryo-set

Kryo-Set max

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen

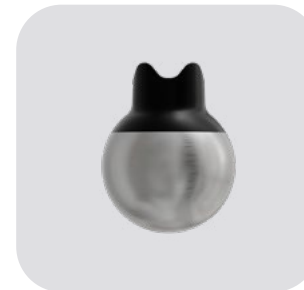

Kryo-Ball

Die runde Edelstahlform passt sich geschwungenen Körperbereichen optimal an und ermöglicht eine gezielte Kälteanwendung an größeren Muskelgruppen.



Kryo-Duo

Besonders geeignet für Rücken & Wirbelsäule. Zwei parallel angeordnete Kugeln ermöglichen die gleichzeitige Behandlung beider Muskelstränge entlang der Wirbelsäule.



Kryo-Teller

Besonders geeignet für Schulter, Oberarm, Rücken. Flacher, kuppelförmiger Aufsatz für flächige sensorische Kälte-Stimulation bei großflächigen Muskelarealen.

novafon max & max+

Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz und Weiß.

Mobility-Set max

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen



Sensi-Roller

Der Sensi-Roller kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des novafon Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität



Kegelaufsatz

Der Kegelaufsatz ermöglicht eine punktgenaue Behandlung von Narben oder dient für präzise Anwendungen, z.B. an Fingern oder schwer zugänglichen Stellen.



Fokusaufsatz

Durch die spitz zulaufende Geometrie des Fokusaufsatzes können die Schallwellen punktuell übertragen und stärker gebündelt werden. Der Fokusaufsatz wird vielseitig eingesetzt und ist optimal für die Behandlung von Triggerpunkten geeignet.

Unsere Praxisausstattungen. Ein Set. Alle Möglichkeiten. für Deine Therapie.


Für den therapeutischen Bereich haben wir für Dich spezielle Therapie- und Praxisausstattungen zusammengestellt. So hast Du alles, was du für deine Behandlung benötigst, in einem Set. Weitere Ausstattungen findest du online in unserem Shop.



Vollausstattung max+

Revolutioniere deine Therapie mit der Physio Vollausstattung max+ und erlebe eine bisher unerreichte Intensität. Enthalten sind:

- novafon max+ inkl. Ladestation
- Transport Case | large
- Mobility-Set | schwarz inkl. Transport Case Mini
- Faszien-Set | schwarz inkl. Transport Case Mini

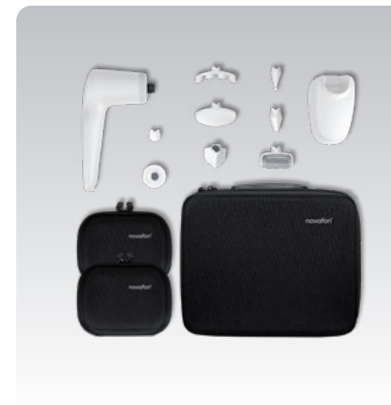

Vollausstattung max

Unsere stärkste Technologie – einfacher denn je. Mit der Physio Vollausstattung max arbeitest Du intuitiv und leistungsstark in deinem Praxisalltag. Enthalten sind:

- novafon max inkl. Ladestation
- Transport Case | large
- Mobility-Set | weiß inkl. Transport Case Mini
- Faszien-Set | weiß inkl. Transport Case Mini



Unser Zubehör. Für dein bestes novafon Erlebnis.

Transport Cases

Dein praktisches Transport Case max | Large bietet dir eine sichere und komfortable Lösung, um dein novafon und Zubehör überallhin mitzunehmen. Mit zusätzlichem Platz für das Transport Case mini, das ideal für die Aufbewahrung der max Aufsatz-Sets geeignet ist, bist du optimal ausgestattet. Perfekt organisiert und geschützt, begleitet dich dein novafon jederzeit zuverlässig.



Ladestation max+ & max

Die Ladestation ist die ideale Ergänzung für dein novafon: Sie bietet nicht nur eine bequeme Lademöglichkeit, sondern sorgt durch ihren stabilen Stand auch dafür, dass dein Gerät immer griffbereit und jederzeit einsatzbereit ist.

Mehr Infos
in unserem Shop.





Unsere Produktwelt **one**

Geräte novafon one+ & one | Aufsatz-Sets & Zubehör



Bisher
bekannt als
NOVAFON power 2

novafon one+

Smartes Multitalent für alle Behandlungen

15 Intensitäten
feinjustierbar über
die novafon App

3 Intensitäten per
Tastendruck

Travel Lock
Funktion

6 cm +
Tiefenwirkung

High-Res
LCD-Display

3 Frequenzen
100 Hz, 75 Hz, 50 Hz

Bluetooth-Konnektivität
zur novafon App

Spritzwasserge-
schützt nach IP 44

Mehr Infos
in unserem Shop.

Bisher
bekannt als
DAS NOVAFON

novafon one

Sanfte Schmerzlinderung sensibler Bereiche.



Mehr Infos
in unserem Shop.



Für jede Anwendung der passende Aufsatz.

Reha-Set one

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen



Teller Aufsatz XL

Der Teller Aufsatz XL bietet eine großflächige Behandlung, die sich besonders für größere Muskelgruppen eignet. Optimal zum Lösen von Verspannungen und zur Aktivierung der Durchblutung.



Igelaufsatz

Der Igelaufsatz kombiniert eine intensive Stimulation mit einem durchblutungsfördernden Effekt. Perfekt zur gezielten Oberflächen- und Tiefensensibilisierung.



Kegelaufsatz

Der Kegelaufsatz ermöglicht eine punktgenaue Behandlung von Narben oder dient für präzise Anwendungen, z.B. an Fingern oder schwer zugänglichen Stellen.

Aufsätze für das novafon one+ und one.

Alle Aufsätze sind erhältlich in Schwarz und Weiß.

Physio-Set one

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen



Faszien-Keil

Tief liegende Muskelzwischenräume und größere Körperpartien werden mit dem Faszien-Keil effektiv ausgestrichen.



Faszien-Ball

Der Faszien-Ball ermöglicht eine großflächige Anwendung, insbesondere an konkaven Flächen wie z. B. Armbeuge oder Taille, sowie eine punktuelle Behandlung.



Faszien-Gabel

Mit der Faszien-Gabel können Muskelstränge und umliegendes Faszien Gewebe gezielt bearbeitet werden.

Weitere Aufsätze für deine Behandlung

Kryo-Set one

bestehend aus folgenden drei Aufsätzen



Kryo-Ball

Besonders geeignet für: Handballen, Ellenbeuge, Nacken, Gesicht. Kompakte, runde Form für die punktgenaue Anwendung an empfindlichen oder kleineren Muskelbereichen.



Kryo-Fokus


Besonders geeignet für: Kiefer, kleine Gelenke, Finger, Triggerpunkte. Konisch geformt für punktuelle, hochpräzise Anwendungen. Zentriert Vibration und Kälte auf einen fokussierten Punkt.



Kryo-Teller

Besonders geeignet für: Unterarme, Unterschenkel, Kniebereich. Kompakte, kuppelförmige Edelstahlfläche für die gleichmäßige Kälteanwendung an mittelgroßen Muskelgruppen.

Schon gewusst? Wir entwickeln unsere Aufsätze in enger Zusammenarbeit mit Therapeut:innen an unserem Standort in der Nähe von Stuttgart und richten sie konsequent an den Anforderungen sowie dem Feedback aus der Praxis aus.

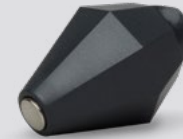

Magnetaufsatz

Durch die spitz zulaufende Geometrie des Magnetaufsatzes können die Schallwellen punktuell übertragen und stärker gebündelt werden. Der Magnetaufsatz wird vielseitig eingesetzt und ist optimal für die Behandlung von Triggerpunkten geeignet.



Sensiroller

Der Sensi-Roller kombiniert lokale Vibration und Igelballmassage zur Schmerzlinderung und Durchblutungsförderung. Er enthält drei Rollen mit unterschiedlichem Härtegraden – weich, mittel und hart –, die individuell eingesetzt werden können.

Mehr Infos
in unserem Shop.



Intraorale Aufsätze one

Ermöglichen eine gezielte vibrotaktile Stimulation im Mundraum und eröffnen damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten – optimal für die CMD-Therapie.



Löffelaufsatz one

für das Schlucktraining mit Nahrung und Zungenspitzentraining

Pfeilaufsatz one

zur Tonusregulation der Kaumuskulatur und Wahrnehmungsförderung

Spatelaufsatz one

ideal zur Zungenkräftigung und Tonisierung der Lippen

Kugelstab one

für präzise und punktuelle Anwendung und Hinweisgeber des Artikulationsortes

Kugelstab XL one

zur intensiven Stimulation und vereinfachten Lokalisation durch die größere Kugel

Trainingslöffel one

unterstützt das Ansaugtraining und die Zungenführung

Olivenroller one

fördert die Zungenmotilität durch drehbare Olive

Sensolöffel one


dient zur Bolusgabe mit vibrotaktilen Reiz



Liegt gut in der Hand.
Entwickelt für deine langen
Behandlungs-Tage.




Unsere ergonomischen Geräte ermöglichen unterschiedlichste Greif- und Haltepositionen und erlauben dadurch ein gezieltes Applizieren der Vibrationen. Das sorgt für eine überaus effiziente und komfortable Behandlung.

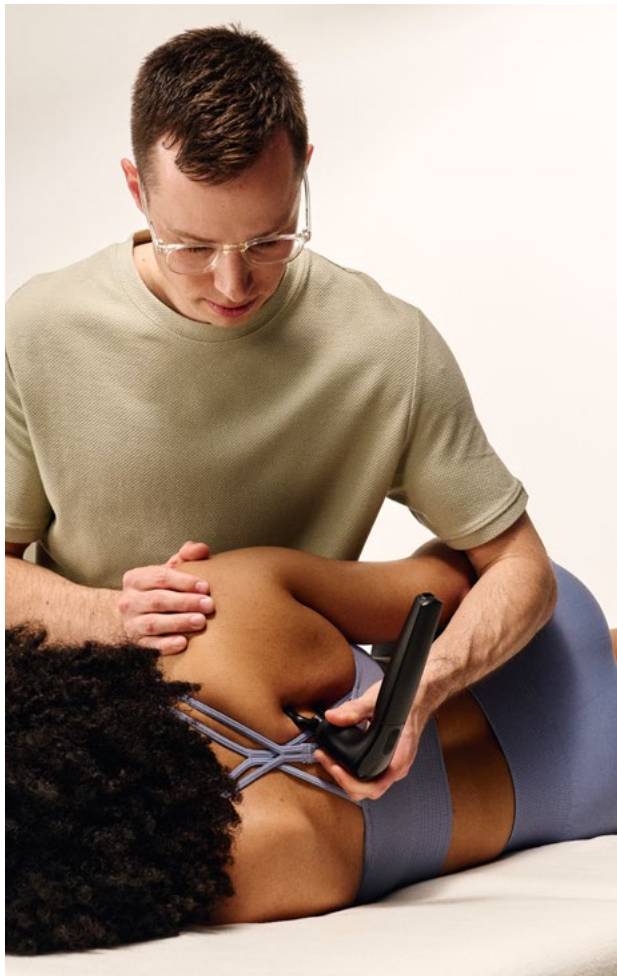

Müheloser Aufsatzwechsel.
Intelligentes Stecksystem
zum Anbringen der Aufsätze.

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand leicht anzubringen oder zu lösen.

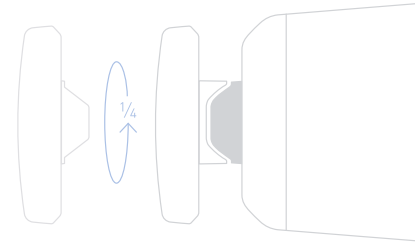

Telleraufsatz
zur flächigen Anwendung
und zum Ausstreichen



Kugelaufsatz
kleinflächigere und
punktuelle Behandlungen

Teller- und Kugelaufsatz,
sowie ein Ladekabel mit
Netzstecker sind Teil des
Lieferumfangs beim Kauf
eines novafon Gerätes.

Transport Cases. Für dein bestes novafon Erlebnis.

Unsere platzsparenden Cases wurden speziell zur Aufbewahrung eines einzelnen oder mehrerer novafon Geräte einschließlich Netzteil/Kabel oder Lieblingsaufsätzen sowie Verlängerungsgriff konzipiert. Individuelles Zubehör kann darüber hinaus bequem in der im Deckel befindlichen Netztasche verstaut werden.



Finde weiteres
Zubehör in unserem
Shop unter:



Unsere Praxisausstattungen. Ein Set. Alle Möglichkeiten.

Für den therapeutischen Bereich haben wir für Dich spezielle Therapie- und Praxisausstattungen zusammengestellt. So hast Du alles, was du für deine Behandlung benötigst in einem Set. Weitere Ausstattungen findest du online in unserem Shop.



Ergo Vollausstattung one+

In der Ausstattung enthalten sind:

- novafon one+ inkl. LS
- Reha-Set one | schwarz
- Physio-Set one | schwarz
- Sensi Roller one | schwarz
- Magnetaufsatz one | schwarz
- Transport Case Set one



Physio Therapieausstattung one+ – Neuro

In der Ausstattung enthalten sind:

- novafon one+ inkl. LS
- Reha-Set one | schwarz
- Sensi Roller one | schwarz
- Transport Case one | large



Logo Vollausstattung one+

In der Ausstattung enthalten sind:

- novafon one
- Reha-Set one | weiß
- Intraoral-Set (8 Aufsätze)
- Transport Case one | medium


Rundum versorgt mit novafon

Anwendungs-App | Anwendungsberatung |
hilfreiche Links & Informationen

Entdecke jetzt unsere novafon Anwendungs-App

Die perfekte Ergänzung zum novafon Schallwellengerät. Der novafon Behandlungs-Guide bietet deinen Patient:innen die Möglichkeit, das Gerät besser kennen zu lernen, die richtige Behandlung zu finden, zu verstehen und durchzuführen. Durch die integrierte Schmerzskala, hast du die Möglichkeit deinen Patient:innen die Erfolge vor und nach deiner Behandlung sichtbar zu machen.

Zudem unterstützt die App deine Patient:innen, die novafon Anwendung noch besser in den Alltag zu integrieren und die Therapie im häuslichen Umfeld weiterführen zu können.

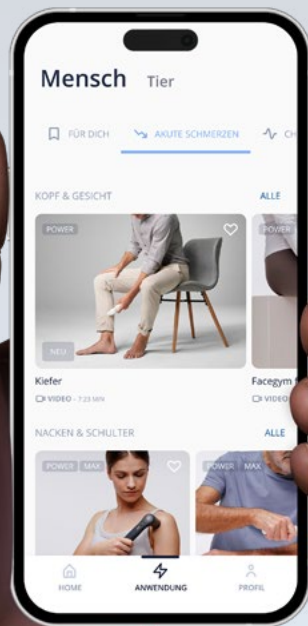

- Erhalte nützliche Infos zu Gerät und Wirkweise
- Erfahre Wissenswertes zu Körperbereichen und Hintergründen
- Abrufbar sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch die Anwendungen
- Einfache und schnelle Firmware Updates (ausgenommen das novafon one)


QR Code scannen & kostenfrei App downloaden



Die Zukunft ist smart.
Praktische Bluetooth-Konnektivität.

Die direkte Bluetooth-Verbindung zwischen novafon max+ oder one+ und der kostenlosen novafon App ermöglicht dir noch bessere sowie personalisierbare, Einstellungsmöglichkeiten.* Tauche ein in die smarte Zukunft der lokalen Vibrationstherapie.

*Nicht verfügbar bei max und one

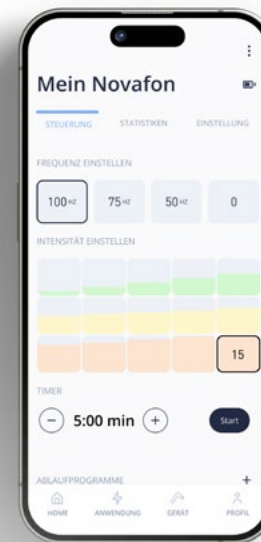

Regulierbare Intensitätsstufen

Das große Intensitätsspektrum mit insgesamt 15 Stufen ermöglicht eine vielseitige Anwendung ganz nach dem Empfinden Deiner Patient:innen und erlaubt die systematische Behandlung jedes Muskels.

Werde kreativ

Mache das novafon one+ oder max+ zu deinem ganz persönlichen Highlight im Praxisalltag, lass dich individuell begrüßen und wähle Deine Lieblings-Displayfarbe. Speichere individuelle Behandlungsabläufe für die Nutzung in der Praxis und die Eigenanwendung deiner Patient:innen.





Informationen & Vorteile für deine novafon Anwendung

Wir unterstützen dich bei der Verwendung unserer novafon Geräte und bieten dir hierzu verschiedene Möglichkeiten:

Beratung

Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit einer unserer Therapeut:innen ist für Dich kostenlos. Passe Deine Behandlung mit dem novafon an deiner individuellen Behandlung an.

Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind für dich kostenlos. Ein:e Therapeut:in führt dich in verschiedene Themen ein und erläutert die Grundfunktionen und Wirkweise des novafon.

FAQs

Du hast noch weitere Fragen? Dann findest du hier sicherlich deine Antworten - unser FAQ-Bereich:



[novafon.com/c/
eigenanwender/
faqs](https://novafon.com/c/eigenanwender/faqs)

Services

Risikofrei testen

Mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gehst du kein Risiko ein: Bist du nicht überzeugt, erstatten wir dir den vollständigen Kaufbetrag. Der Rückversand innerhalb Deutschlands ist für dich kostenlos.

Therapeutenpreise

Als Medizinproduktehersteller sind wir den Therapieberufen besonders verbunden. Deshalb profitieren Therapeut:innen von einem exklusiven Preisvorteil: 50€ Ersparnis auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Nach deiner Registrierung und Anmeldung im Shop wird der Therapeut:innenrabatt automatisch hinterlegt und direkt beim Kauf abgebogen.



novafon.com/account

Finde hier wichtige Hinweise und hilfreiche Links.

Kontraindikationen

Die Lokale Vibrationstherapie ist eine einfache, sichere und effektive Therapiemethode. Beachte jedoch bitte die folgenden Kontraindikationen und Hinweise zu Nebenwirkungen. Eine Anwendung von novafon ist nicht zulässig bei:

- Offenen Wunden / Ekzemen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Arteriosklerose (in der zu behandelnden Körperregion)
- Aktuellen Episoden von Epilepsie
- Schwangerschaft
- Implantaten (in der zu behandelnden Körperregion)
- Herzschrittmachern, Defibrillatoren
- Thrombosen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Hirnschrittmachern und Hirnstimulatoren
- Herzrhythmusstörungen
- Tumoren, kanzerös und nicht kanzerös
- Akuten entzündlichen Stellen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Akuten Episoden entzündungsbedingter Krankheiten

Nebenwirkungen

Bitte beachte, dass es zu folgenden Nebenwirkungen kommen kann:

- Schmerzverstärkung/unangenehme Empfindung (gelegentlich)
- Unwohlsein/ Schwindel/ Unruhezustände (gelegentlich)
- Hautirritationen (selten)
- Blaue Flecke (sehr selten)
- Reflexe/ ungewollte Muskelkontraktionen (selten)
- Muskelkater (selten)

Brich die Behandlung unverzüglich ab, sollte sich eine dieser Nebenwirkungen einstellen. Beachte, dass gerade bei der Schmerzbehandlung eine Erstverschlimmerung der Beschwerden eintreten kann, bevor du eine Verbesserung feststellst. Eine leichte Hautrötung und -erwärmung stellen keinen Grund zur Besorgnis dar. Dies ist ein gewünschter Effekt der Lokalen Vibrationstherapie, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht.

** Quelle „Gate-Control-Prinzip“

Lundeberg T. 1984c. The pain suppressive effect of vibratory stimulation and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) as compared to aspirin. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-med/6608397>

Staud R, Robinson ME, Goldman CT, et al. Attenuation of experimental pain by vibro-tactile stimulation in patients with chronic local or widespread musculoskeletal pain. *Eur J Pain*. 2011 Sept;15(8):836-42.

Melzack, R.; Wall, P. D. Pain mechanisms: a new theory. *Science*. 1965 Nov 19; 150(3699): 971–979. doi: 10.1126/science.150.3699.971. PMID: 5320816.

© 2026 by NOVAFON - Elektromedizinische Geräte GmbH, 71384 Weinstadt

Eine Haftung des Unternehmens und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Alle Rechte, insbesondere das Recht an Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung in weitere Sprachen, vorbehalten. Das Buch ist für die novafon GmbH nach § 54 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG urheberrechtlich geschützt.



NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstr. 13, 71384 Weinstadt
www.novafon.de



2500072-00_V01 Stand: 04/26



[novafon_de](https://www.facebook.com/novafon_de)